

ضد عفونی کننده های ابزار و تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی

ASEPTINE®

PERCIDINE®



پرسیدین-آریو

EN 13704

ضد عفونی کننده سطح بالا و استریل کننده لوازم حساس پزشکی

ترکیبات: پراکسی استیک اسید، استیک اسید، هیدروژن پراکساید
طیف اثر میکروبی: از بین برنده تمامی میکروارگانیسمها
مزایای مصرف:

- ضد عفونی سطح بالا (High-Level) با استفاده از بنیان قدرتمند پراستیک اسید
- کاملاً ایمن و غیرسمی برای کاربران
- مؤثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسمها حتی اسپور باکتریایی
- قابلیت نگهداری و استفاده مجدد از محلول تا ۱۴ روز
- قابلیت ضد عفونی انواع ابزار و تجهیزات پزشکی از قبیل انواع سیستمهای آندوسکوپی
- قابلیت ضد عفونی سطح بالا (High-Level) تنها در ۱۰ دقیقه
- حاوی مواد ضد خوردگی و فاقد اثرات خوردگی بر روی فلزاتی مانند مس، قلع، سرب و لاستیکهای مقاوم
- بسته بندی: ۵ لیتری



اسپورسیدین

EN 13704

ضد عفونی کننده سطح بالا بر پایه گلو تار آلدهید مخصوص انواع آندوسکوپها

EN 14348

ترکیبات: گلو تار آلدهید (۲/۵٪)، سورفکتانت های ویژه
طیف اثر میکروبی: مؤثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسمهای بیماریزا، شامل باکتری، ویروس، قارچ، مایکوباکتریوم و اسپورهای باکتریایی
زمان تماس (ضد عفونی سطح بالا): ۲۰ دقیقه
مزایای مصرف:

- ضد عفونی سطح بالا (High-Level) با استفاده از بنیان گلو تار آلدهید
- آماده به مصرف و بدون نیاز به هر گونه فعال کننده
- مؤثر بر طیف وسیعی از عوامل عفونی، شامل مایکوباکتریومها و اسپور باکتریایی
- قابلیت نگهداری و استفاده مجدد تا ۲۸ روز
- محلول ایده آل برای ضد عفونی انواع ابزار و تجهیزات حساس به حرارت از قبیل انواع آندوسکوپها
- بدون ایجاد اثرات خوردگی و کاملاً سازگار با انواع ابزار از مواد مختلف
- دارای تست کیت و دستورالعمل سنجش میزان ماده مؤثره (تست سوابینگ)
- بسته بندی: ۱ و ۵ لیتری



EN 1040

EN 13727



سایا سپت - اچ آی

ضد عفونی کننده کنسانتره ابزار آلات حساس پزشکی

ترکیبات: دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید، پلی هگزامتیلن بیگوانید هیدروکلراید (PHMB)
طیف اثر میکروبی: باکتری کش (باکتری های گرم مثبت، گرم منفی و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس)،
ویروس کش (ویروس های پوشش دار نظیر HIV, HBV, HCV) و قارچ کش

مزایای مصرف:

- نسل جدید آمونیوم های چهار تایی و PHMB جهت مقابله با مقاومت میکروبی
- دارای قابلیت پاک کنندگی و ضد عفونی کنندگی همزمان
- مؤثر بر طیف وسیعی از عوامل عفونت های بیمارستانی
- اثر بخشی بالا در غلظت های پایین و کاملاً مقرون به صرفه
- فاقد مواد آلدئیدی، فنل و سایر ترکیبات سمی و زیان آور
- فاقد اثرات خوردگی و کاملاً ایمن برای انواع ابزار و تجهیزات
- قابلیت نگهداری و استفاده مجدد محلول رقیق شده تا ۱۴ روز
- قابلیت استفاده در سیستم های شستشوی التراسونیک

کاربرد	رقت مصرفی	زمان اثر گذاری	روش مصرف
ضد عفونی کننده کنسانتره ابزار آلات حساس پزشکی	۱ درصد	۳۰ دقیقه	غوطه وری
	۲ درصد	۱۵ دقیقه	

بسته بندی: ۱ و ۵ لیتری



EN 1040

EN 14348




سپتی سیدین توربو

محلول ضد عفونی کننده سریع، ویژه ابزار و تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی

ترکیبات: ایزوپروپانول، دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید
طیف اثر میکروبی: باکتری کش، ویروس کش و از بین برنده مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و ویروس های پوشش دار و بدون پوشش

مزایای مصرف:

- دارای خاصیت سریع و مؤثر به واسطه وجود ایزوپروپانول در محلول (اثر بخشی در ۱ دقیقه)
- دارای اثرات پایدار ضد میکروبی به واسطه وجود دی دسیل دی متیل آمونیوم کلراید
- مؤثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم ها به واسطه ترکیب الکل و آمونیوم چهار تایی نسل جدید
- فاقد ترکیبات آلدئید، فنل و کلر، ایمن برای کاربران
- سازگار با انواع ابزار و تجهیزات درمانی
- بسته بندی: ۵۰۰ سی سی و ۵ لیتری

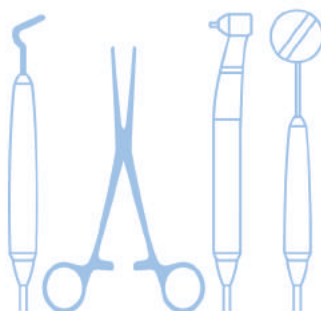

Medical and Dental Instruments & Equipment Disinfectants

نشانی دفتر مرکزی: خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، ساختمان کاوه،
بلوک B، طبقه ۱۲، واحد ۱۱۳
تلفن: ۶۶۵۸۱۲۶۳ و ۹، ۶۶۵۸۱۲۶۷، ۵ - ۶۶۵۸۱۲۹۴ فکس: ۶۶۵۸۱۳۵۴
نشانی کارخانه: استان گلستان، گرگان، شهرک صنعتی آق قلا فاز ۳، خیابان صنعت ۴
تلفکس: ۱ - ۳۴۵۳۳۷۰۰ ، ۹ - ۳۴۵۳۳۵۶۶ (۰۱۷) شماره داخلی فکس: ۱۴



www.bebban.com

info@bebban.com