




Ambu aScope 3 Family

Tried and trusted

Ambu[®] aScope[™] 3 که همیشه یک برونکوسکوپ آماده در اختیار شماست.

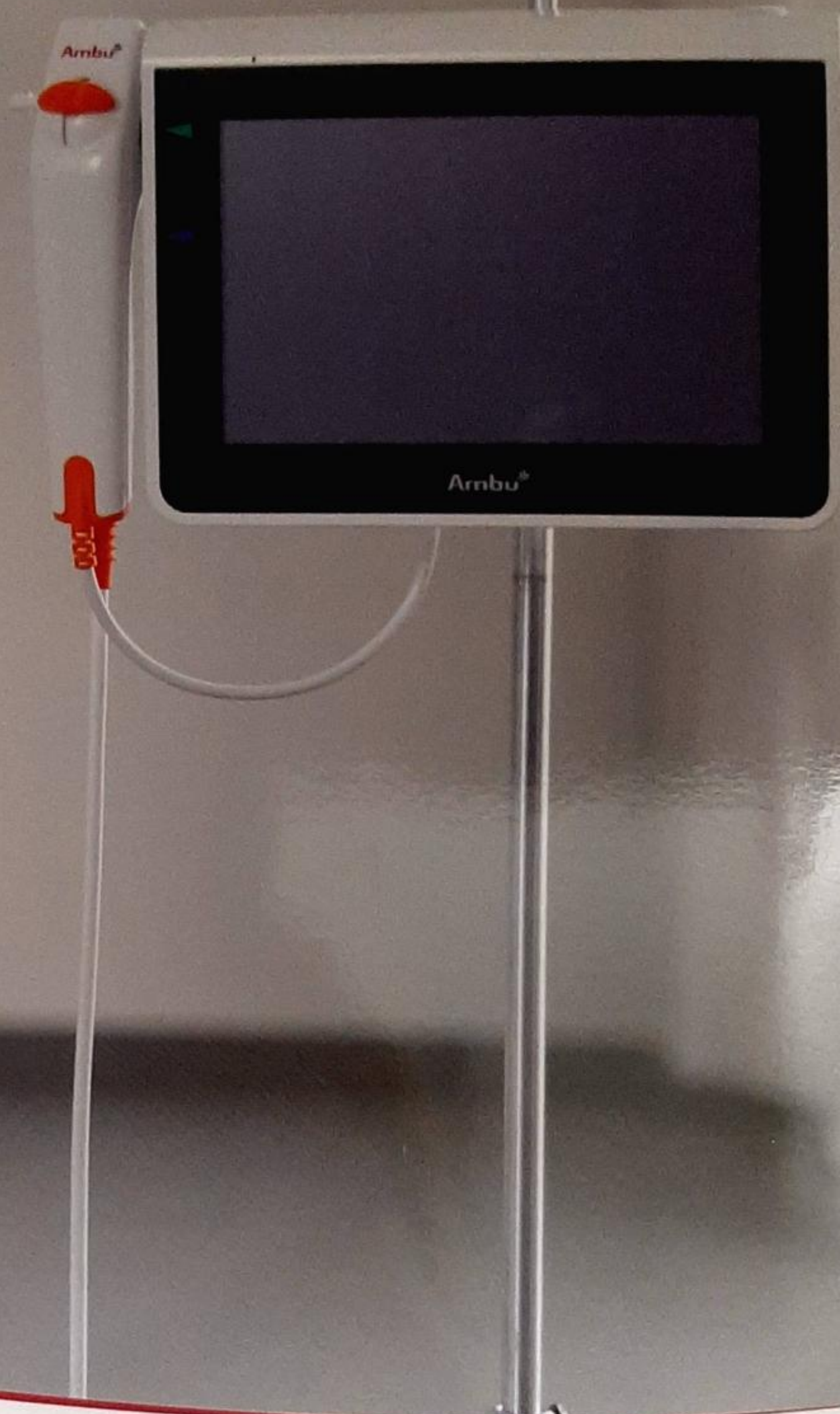

بهبود ایمنی بیمار

aScope[™] 3 دستگاهی استریل با دسترسی سریع و انعطاف پذیری بالا که ریسک آلودگی را کاهش و ایمنی بیمار را افزایش می دهد.



ارتقا کارایی محصول

aScope[™] 3 با حذف مراحل وقت گیر استفاده و نگه داری برونکوسکوپ های چند بار مصرف، در صرفه جویی زمان به شما کمک می کند.



سیستمی با سه سایز برونکوسکوپ برای برطرف کردن نیازهای شما

با aScope[™] 3 همواره در مواقع نیاز به برونکوسکوپ استریل دسترسی خواهید داشت.

aScope[™] 3 برای برآوردن احتیاجات شما در انتوباسیون، جایگذاری لوله تراشه های دابل لومن، ساکشن ترشحات و نمونه برداری ریه در سه سایز مختلف Large، Regular و Slim طراحی شده است. رنگ بندی کددار aScope[™] 3 پیدا کردن سریع سایز درست کمک می کند.

aScopeTM 3 دستگاهی ایده آل برای پروسیجرها بالینی ICU


- بررسی راه هوایی
- انتوباسیون دشوار
- مدیریت ترشحات باقی مانده
- شستشوی برونش (لاواژ برونکو آلوئولار)
- تراکتوستومی اتساعی از راه پوست^۱
- نمونه برداری به روش Protected Specimen Brush



کیفیت تصویر واضح aScopeTM 3 ، مشاهده و بررسی بروش را آسان کرده است.



aScopeTM 3 را می توان به بخش های مختلف ریه هدایت کرد.

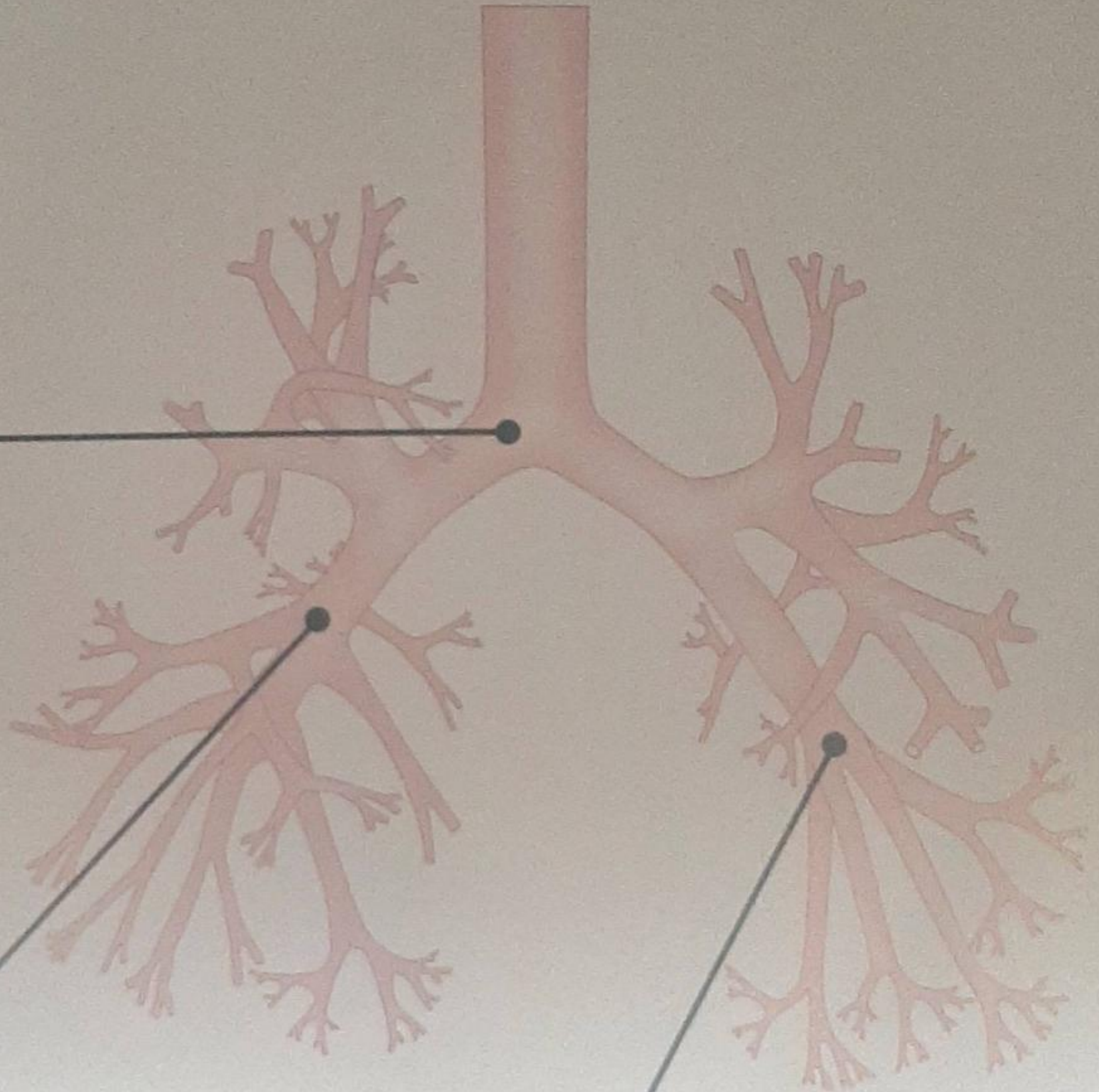


aScopeTM 3 را می توان برای نمونه برداری به روش PSB استفاده کرد.


- 1- Percutaneous Dilatational Tracheostomy
- 2- Protected Specimen Brush

aScope™ 3 دستگاهی ایده آل برای پروسیجرهای اتاق عمل

- انتوباسیون
- بررسی راه هوایی
- جاگذاری و چک کردن تیوب های دابل لومن
- قرار دادن بلوک کننده های برونش

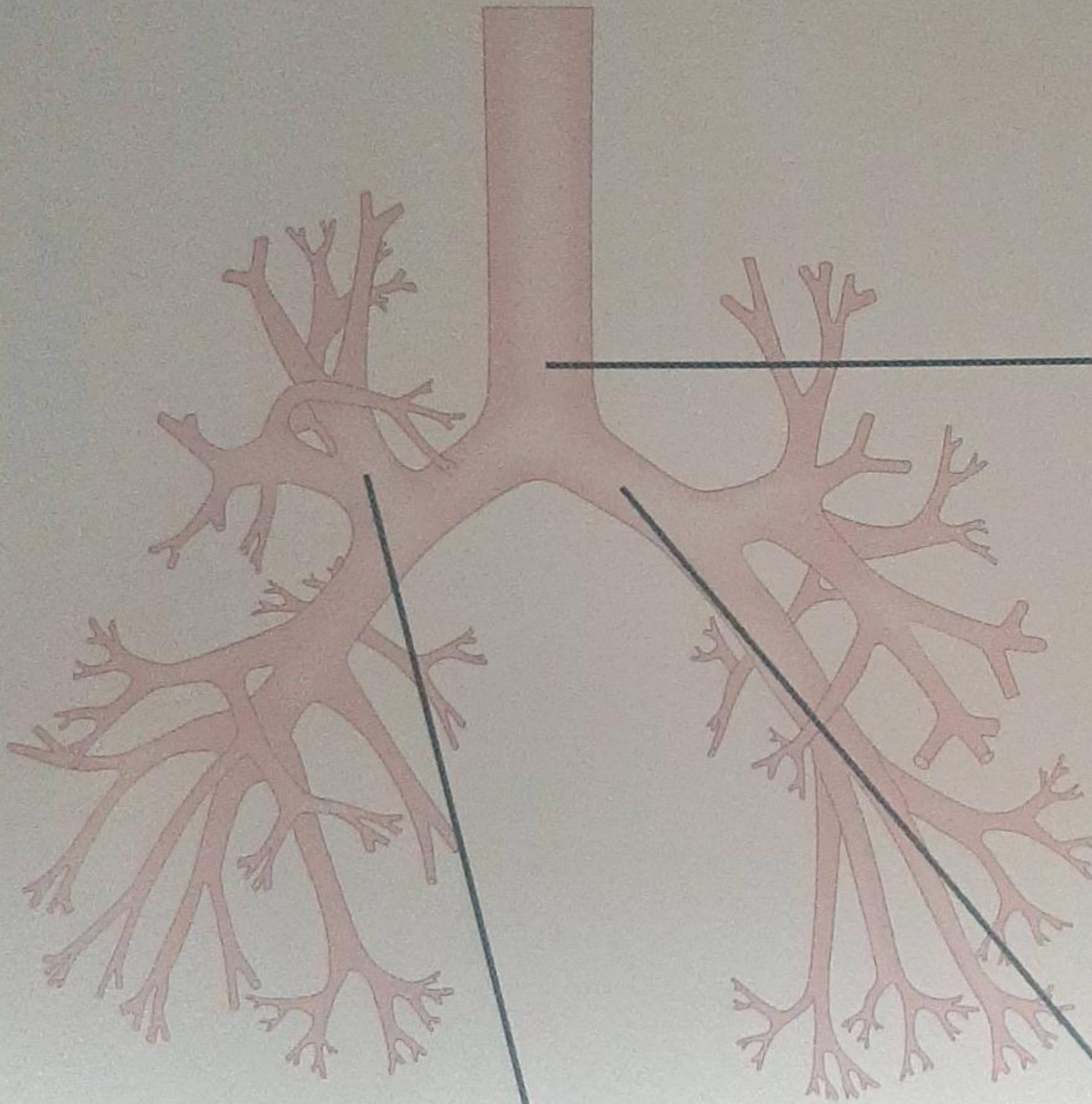

تصویر واضح aScope™ 3 شما را از قرارگیری صحیح DLT مطمئن می کند.

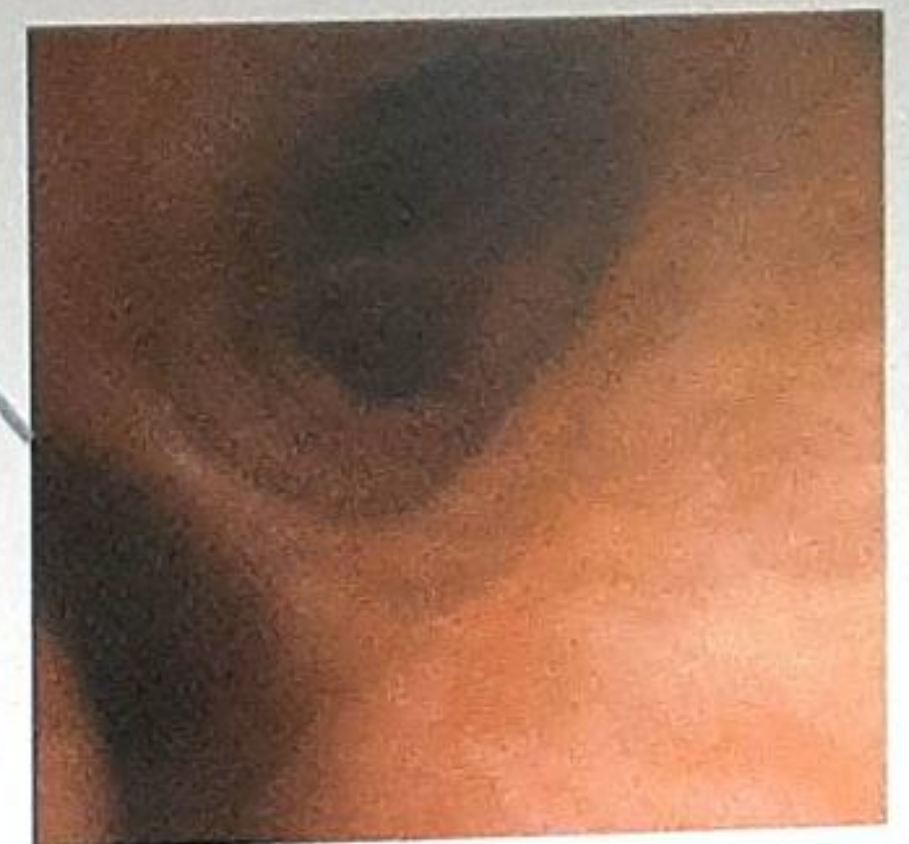

قابلیت مانور دستگاه این امکان را به شما می دهد که به بخش های دشوار ریه مانند RUL apical دسترسی داشته باشید.



اطمینان از باز بودن لومن ها از طریق DLT

Ambu[®] aView[™] مانیتور پرتابل برای Ambu[®] aScope[™] 3



aView[™] یک مانیتور پرتابل با رزولوشن بالا است که با تمام اسکوپ های منعطف و یک بار مصرف Ambu سازگار می باشد.

کیفیت تصویر و رزولوشن بالای دستگاه به راهبری آسان و شناسایی سریع لندهمارک های آناتومیکی کمک می کند.

بزرگنمایی تصویر به دید بهتر از فاصله ی دور کمک می کند.

مزایای کلیدی aView[™]

- مانیتور لمسی پرتابل
- عملیات سریع
- انتقال آسان فایل با USB
- حداقل سه ساعت عمر باتری
- دید بهتر با بزرگنمایی تصویر
- امکان نمایش تصاویر بر روی مانیتور خارجی به منظور آموزش




قابلیت Video-out برای نمایش تصاویر aView[™] بر روی مانیتور خارجی

		SLV Placement of DLTs and BBs	Difficult intubation	Bronchial inspection	BAL/BW	Protected Specimen brush sampling	PDT	Management of retained secretion	Management of tough retained secretion	
	Ambu [®] aScope [™] 3 Slim 1.2/3.8 Ref # 402001000	●	●	●						ETT ≥ 5 DLTs ≥ 37
	Ambu [®] aScope [™] 3 Regular 2.2/5.0 Ref # 403001000	●	●	●	●	●	●	●		ETT ≥ 6 DLTs ≥ 39
	Ambu [®] aScope [™] 3 Large 2.8/5.8 Ref # 414001000		●	●	●	●	●	●	●	ETT ≥ 7
	Ambu [®] aView [™] Ref # 405002000									

سه سایز برونکوسکوپ با رنگ بندی کد دار


aScope 3 Regular

قطر لوله ورودی: ۵ میلیمتر
پهنای مسیر جانبی: ۲,۲ میلیمتر
زاویه خمش: ۱۵۰/۱۳۰ درجه
رابط برای ثابت نگه داشتن ET tube

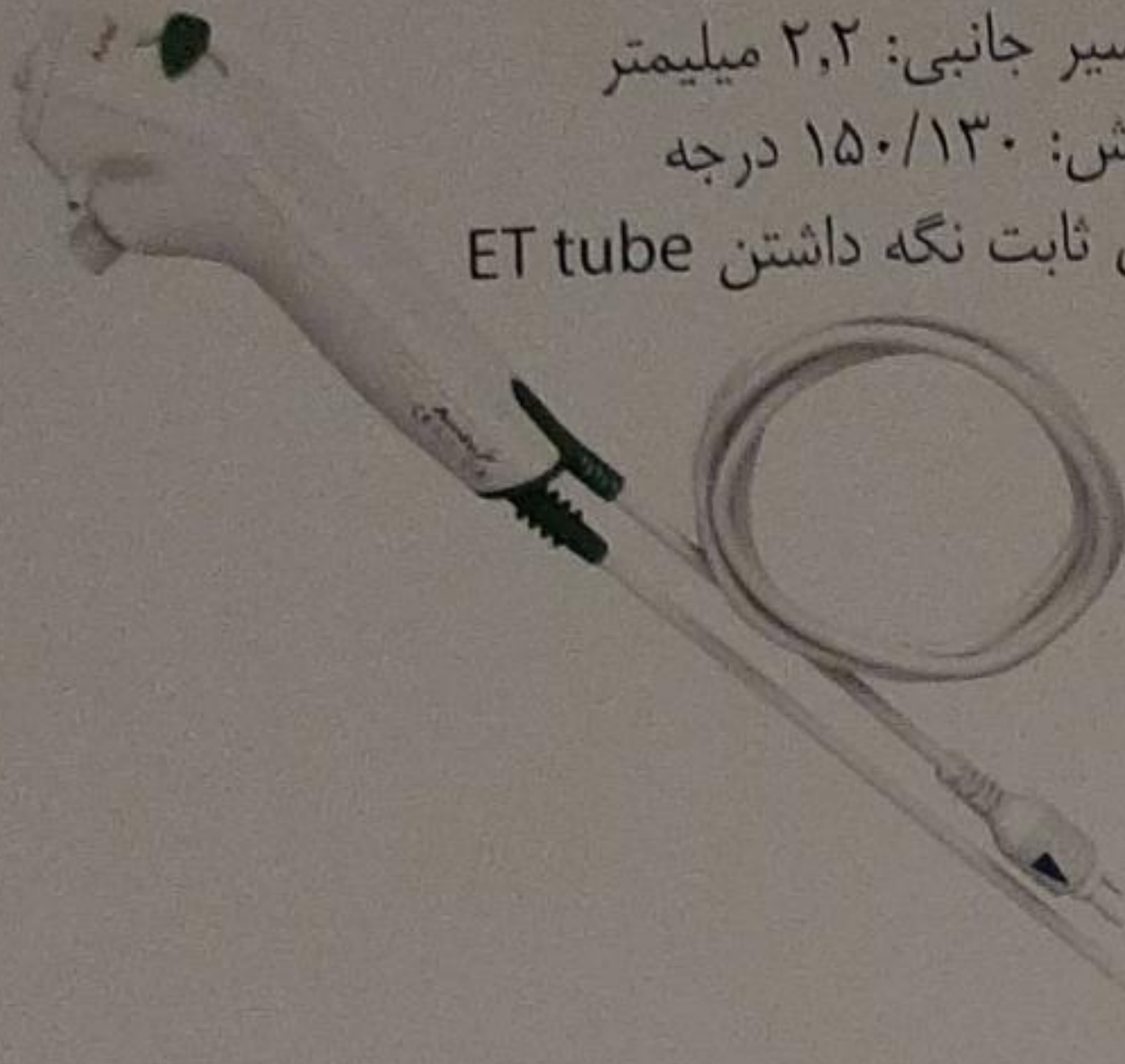


aScope 3 Large

قطر لوله ورودی: ۵,۸ میلیمتر
پهنای مسیر جانبی: ۲,۸ میلیمتر
زاویه خمش: ۱۴۰/۱۱۰ درجه
رابط برای ثابت نگه داشتن ET tube

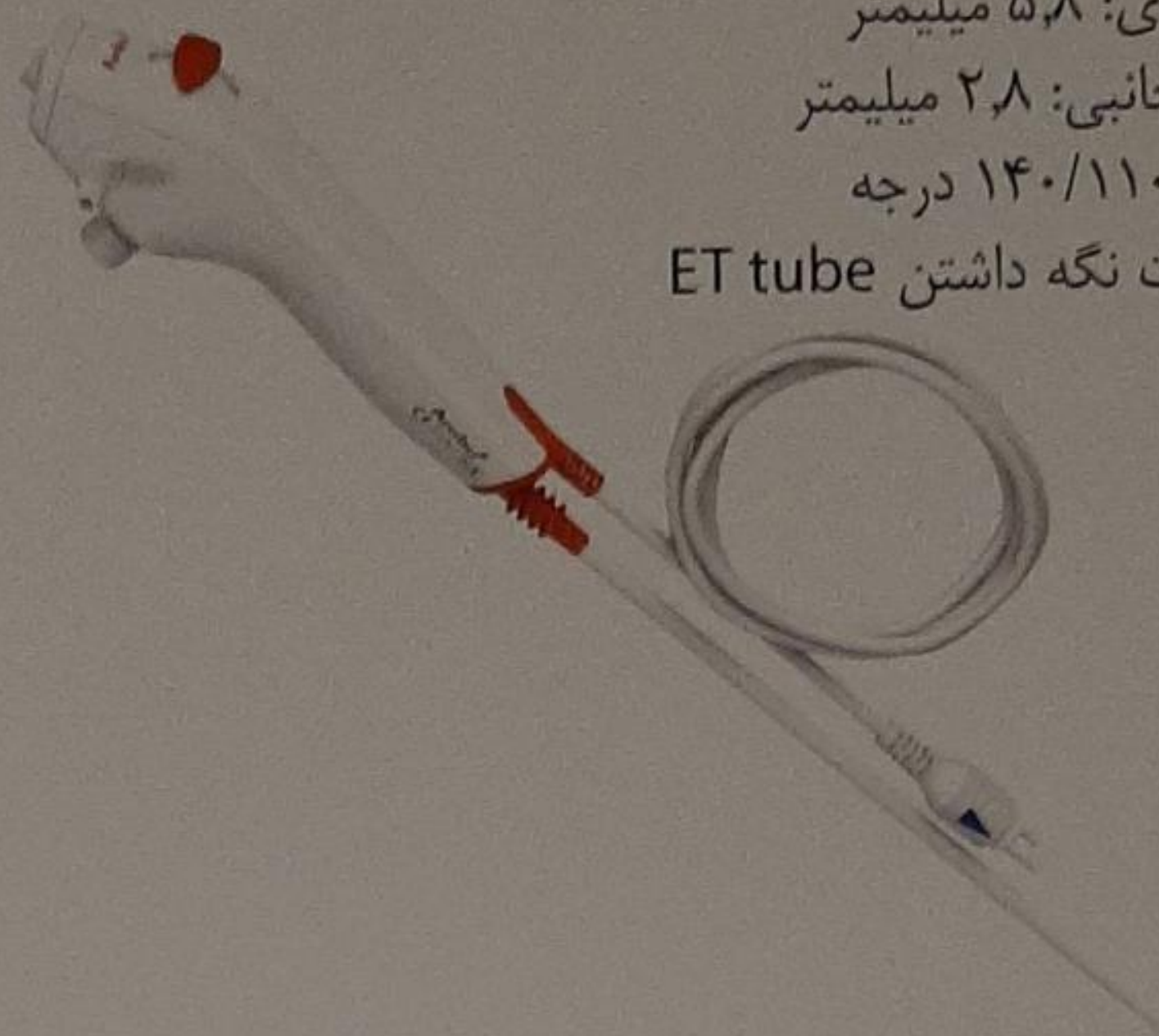

aScope 3 Slim

قطر لوله ورودی: ۳,۸ میلیمتر
پهنای مسیر جانبی: ۱,۲ میلیمتر
زاویه خمش: ۱۳۰/۱۳۰ درجه
رابط برای ثابت نگه داشتن ET tube

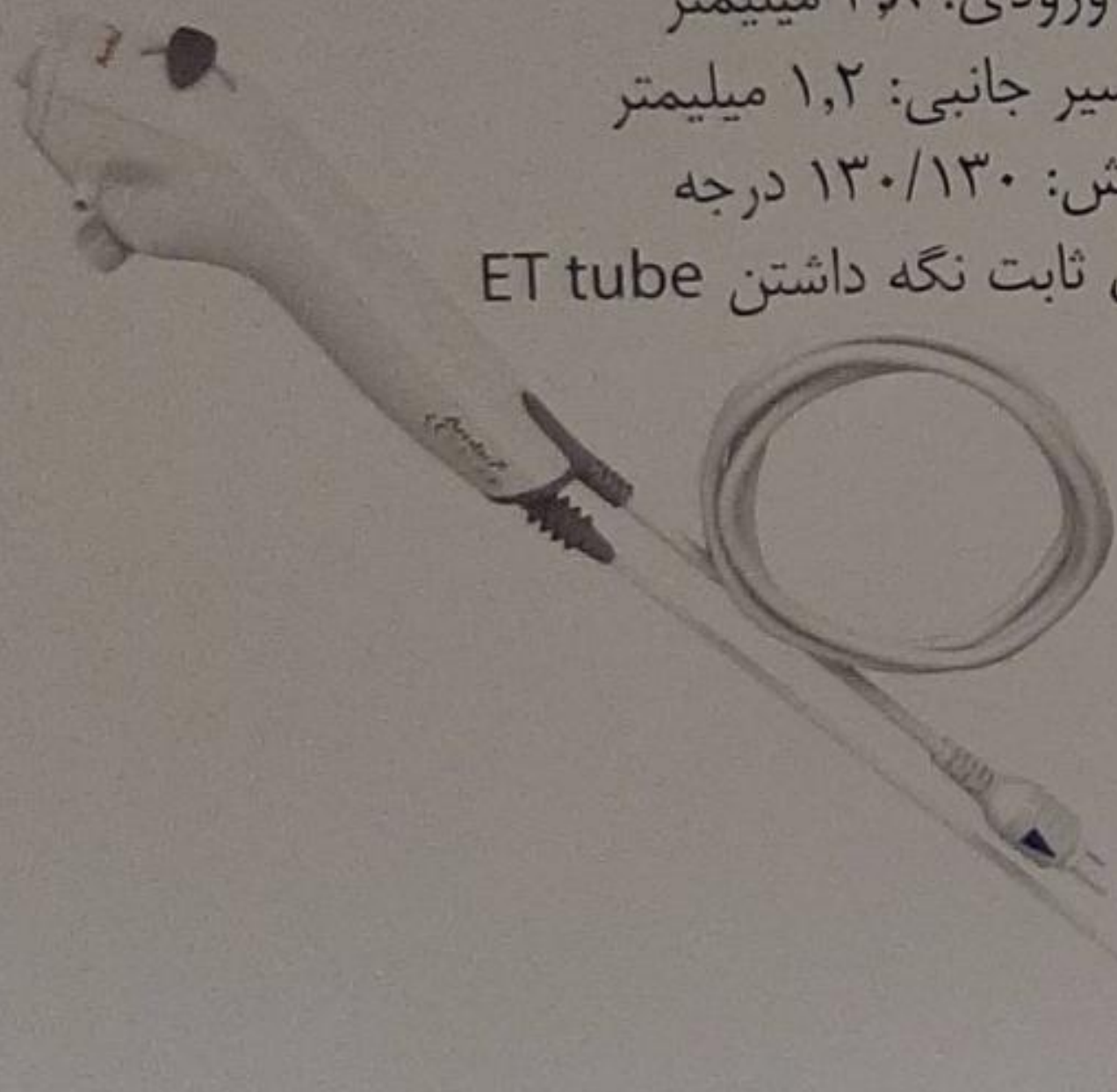


aView Monitor

مانیتور لمسی پرتابل



شش دلیل استفاده از aScopeTM 3

دسترسی سریع دستگاه در مواقع نیاز، ایمنی بیمار را افزایش می دهد.

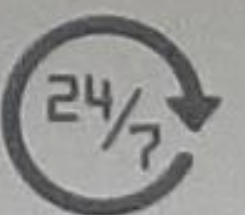

aScopeTM 3 دستگاهی استریل و بدون ریسک آلودگی



aScopeTM 3 پرتابل و با راه اندازی سریع برای استفاده



aScopeTM 3 بدون هیچ هزینه ی اضافی با سه سایز مختلف در دسترس است.



aScopeTM 3 با سرمایه ای اندک با حذف هزینه های نگه داری و تعمیر، مقرون به صرفه است.




aScopeTM 3 دسترسی ساده ای برای تمرین مهارت های برونکوسکوپی شما فراهم می کند.



Specifications

Optical system	85°
Field of View	0° (forward viewing)
Direction of View	19.8 mm
Depth of Field	LED
Illumination method	
Insertion portion	°150 up, °130 down°
Bending section	5.0 mm (0.20")
Insertion cord diameter	5.4 mm (0.21")
Distal end diameter	5.5 mm (0.22")
Maximum diameter of insertion portion	6.0 mm
Minimum endotracheal tube size (inner diameter)	41 Fr
Minimum double lumen tube size (inner diameter)	600 mm (23.6")
Working length	
Channel	2.2 mm (0.087")
Average inner diameter	2.0 mm (0.079")
Minimum instrument channel width	
Suction connector	Ø7mm +/- 1mm
Connecting tube inner diameter range	
Operating environment, storage & transportation	
Temperature - transportation	°40 ~ 10 C (50 to °104 F)
Temperature - operating environment	°40 ~ 10 C (50 to °104 F)
Temperature - storage	°25 ~ 10 C (50 to °77 F)
Relative humidity	%85 ~ 30
Atmospheric pressure	109 ~ 80 kPa
Altitude	≤2000m
Sterilisation	
Method of sterilisation	EtO

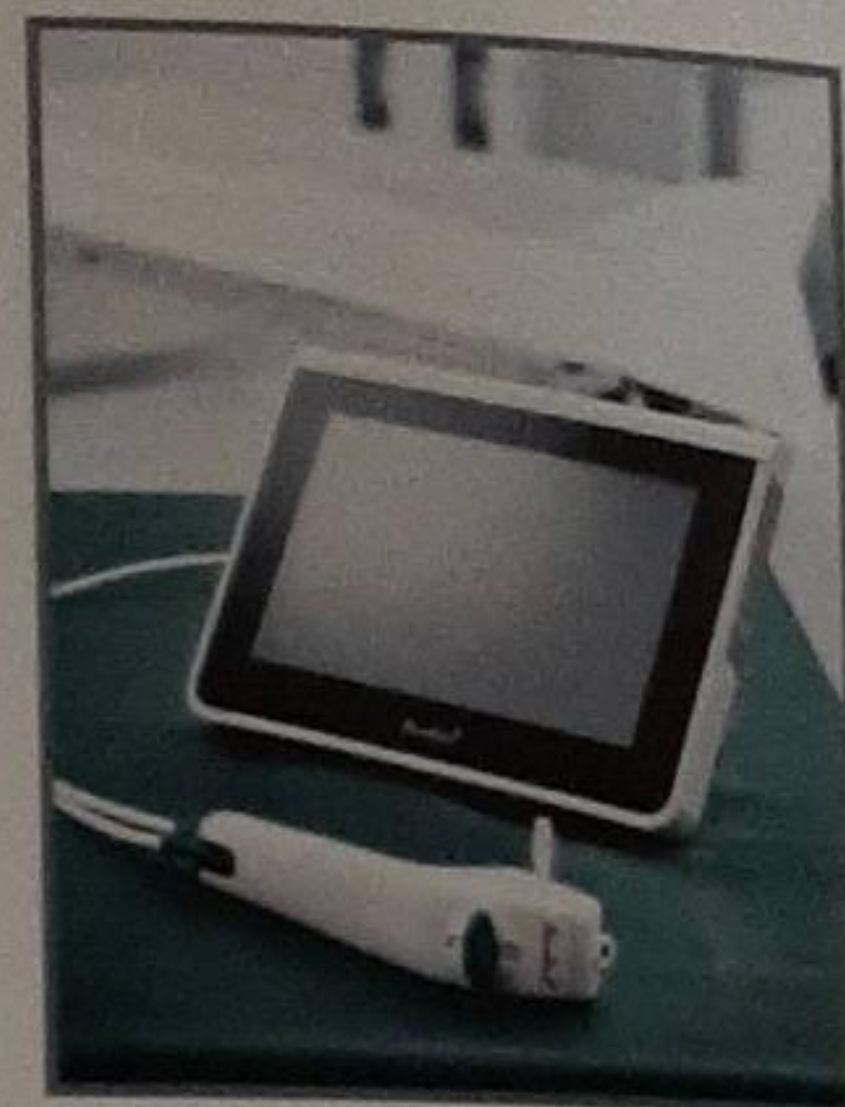

Ambu® aScope™ 3 Regular
and Ambu® aView™



طراحی ارگونومیک و سبک دسته
برای راحتی کاربر

Ordering specifications

Item no.	Quantity (Ambu® aScope™ 3 Regular 2.2/5.0)
403001000	5

Introducer

برای تسهیل ورود سرنگ‌های
Luer lock و لوازم جانبی آندوسکوپی
از طریق مسیر جانبی استفاده می‌شود.

اهرم کنترل

سر انتهایی را در یک صفحه به طرف
بالا و پایین حرکت می‌دهد.

رابط ساکشن
محل اتصال لوله ساکشن

قسمت خم شونده
قسمت منعطف با زاویه خم
۱۳۰ تا ۱۵۰ درجه.

ورودی مسیر جانبی
محل تزریق مایعات و
قرار دادن لوازم جانبی
آندوسکوپی

دکمه ساکشن
با فشردن این دکمه
ساکشن فعال می‌گردد.

رابط لوله
برای ثابت نگه داشتن
ET tube به کار می‌رود.

سر لوله ورودی
شامل دوربین، منبع نور (دو LED) و مسیر جانبی

Ambu
Ideas that work for life



**Daru Darman**
دارو درمان پرشیا (مسئولیت محدود)
Daru Darman Persia Co.(ltd)

آدرس: تهران، طالقانی، بعد از تقاطع حافظ، پلاک ۲۵۱، طبقه پنجم، واحد ۹

تلفن: ۰۲۱ ۵۴۰۶۱

فکس: ۰۲۱ ۸۸۹۲۵۴۶۲