

وسیله کنترل بافت بدون گره

نخ های خاردار


تکنیک های بستن زخم به دو صورت انجام می پذیرد که هر کدام دارای مزایا و معایب خود می باشند. برای داشتن یک بستن زخم بهینه، امن و مطمئن باید مزایای هر دو روش را کنار هم داشته باشیم. برای این منظور وسیله کنترل بافت بدون گره، **استراتافیکس**، معرفی می گردد.

❖ این وسیله کنترل بافت بدون گره به دو نوع تقسیم بندی می شود:

- استراتافیکس سیمتریک
- استراتافیکس اسپایرال

و دارای ویژگی های زیر است:



- امنیت
- استحکام بیشتر
- کارایی بهتر

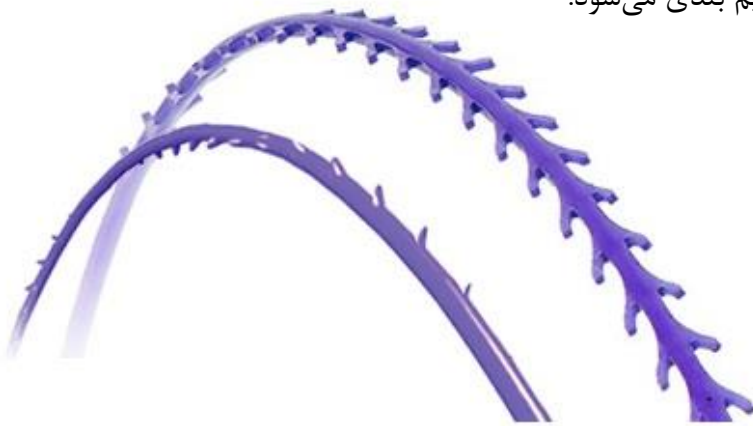


استراتافیکس سیمتریک

این وسیله طراحی خاص شرکت اتیکون می باشد.


- برای استفاده در محل های پرتنش نظیر فشیا
- از جنس PDS پلاس

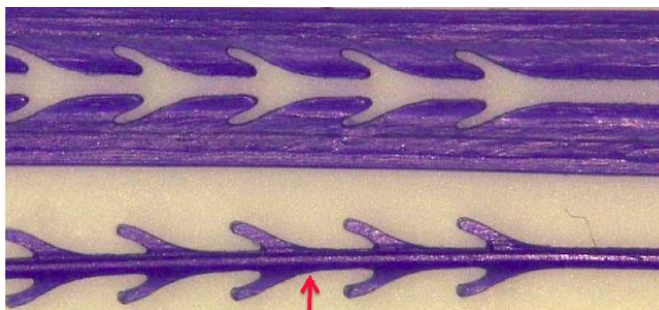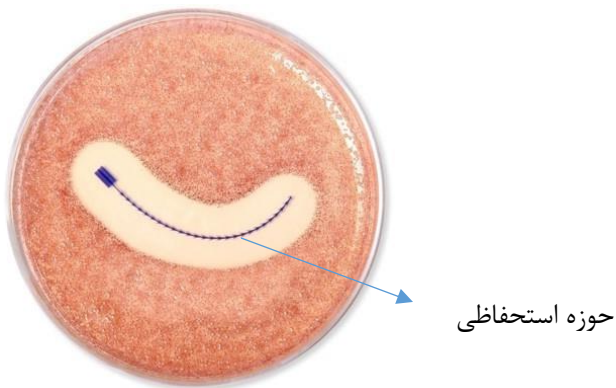

خارهای این نوع استراتافیکس داخل هسته اصلی نخ نرفته و در هر سانتی متر حدودا ۵ خار وجود دارد.

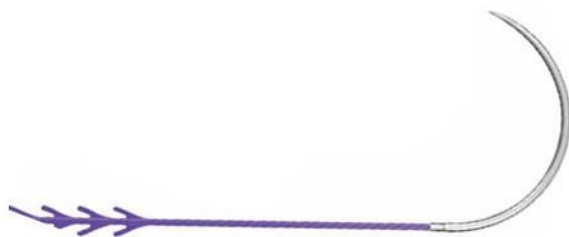

فاصله اتصال سوزن به نخ تا شروع خارها حدودا ۱,۹ سانتی متر

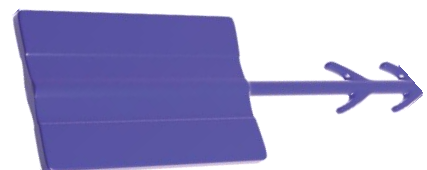

ثابت کننده انتهایی

استراتافیکس اسپایرال


این نوع استراتافیکس دارای دو طراحی می باشد:

• دو طرفه



فاصله بین تغییر جهت خارها حدودا ۲ میلی متر

• یک طرفه

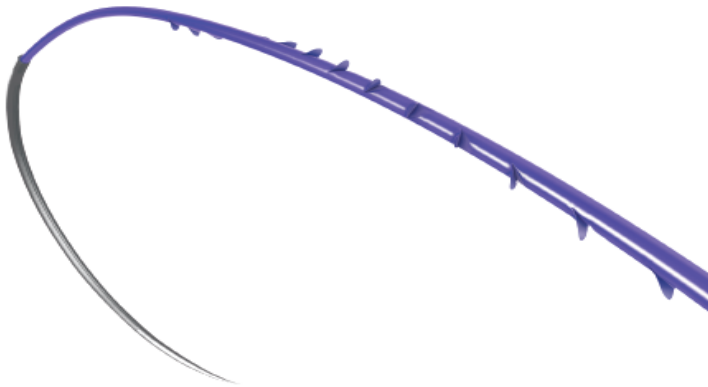

• خارهای این نوع استراتافیکس به صورت ۳۶۰

درجه دور رشته نخ تعبیه شده و در داخل هسته

اصلی نخ (۳۰٪) رفته است.

• زاویه خارها ۱۵ درجه است.

• در هر سانتی متر حدودا ۸ خار وجود دارد.

• از جنس مونوکریل پلاس، پی دی اس پلاس و پلی پروپیلن می باشد.

فاصله اتصال سوزن به نخ تا شروع خارها حدودا ۳۵ میلی متر

